


Acidi Grassi Metil Esteri (FAMES) C4 - C18:3

Colonna: **MEGA-WAX - 0.32mm, 0.25 μ m, 25m**

Codice Catalogo: S-WAX-032-025-25

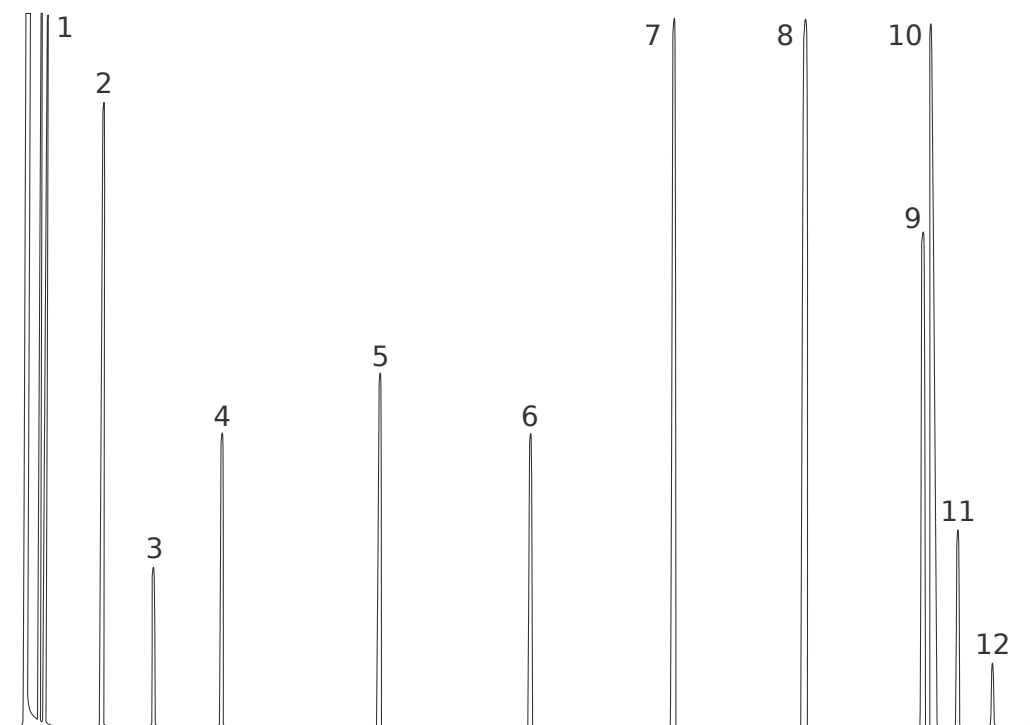

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0 μ L, 1:50 rapporto di Split.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 50°C, 4°C/min, 210°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 60 kPa.

Identificazione:

1. Acido Butirrico ME (C4)
2. Acido Caproico ME (C6)
3. Acido Eptanoico ME (C7)
4. Acido Caprilico ME (C8)
5. Acido Decanoico ME (C10)
6. Acido Laurico ME (C12)
7. Acido Miristico ME (C14)
8. Acido Palmitico ME (C16)
9. Acido Stearico ME (C18:0)
10. Acido Oleico ME (C18:1)
11. Acido Linoleico ME (C18:2)
12. Acido Linolenico ME (C18:3)

