

Condizioni:


Iniezione: Split 250°C, 0.5µL, 1:50 rapporto di Split.


Diluizione del campione: 1mg/1mL in n-Esano.


Contattaci per avere maggiori informazioni.


Cineolo (+/-)

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX


 Fase Chirale: **MEGA-DEX DET Beta**
Codice Catalogo: DEX-DET-B-025-025-25

 Fase Chirale: **MEGA-DEX DMT Beta**
Codice Catalogo: DEX-DMT-B-025-025-25

 Fase Chirale: **MEGA-DEX DAC Beta**
Codice Catalogo: DEX-DAC-B-025-025-25

 Fase Chirale: **MEGA-DEX DMP Beta**
Codice Catalogo: DEX-DMP-B-025-025-25

Dimensioni delle colonne: **0.25mm, 0.25µm, 25m.**

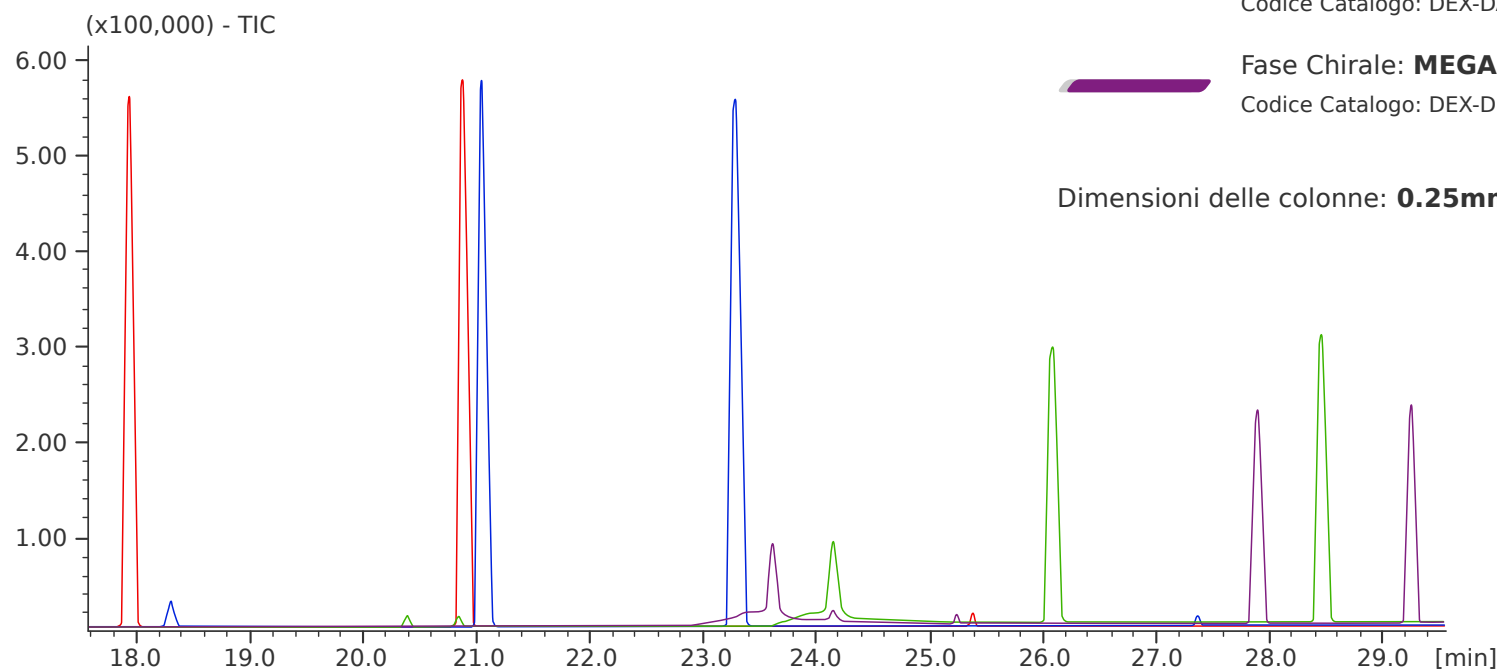

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Cordero et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

