


ACIDI GRASSI ME (FAMEs) C4 – C18:3

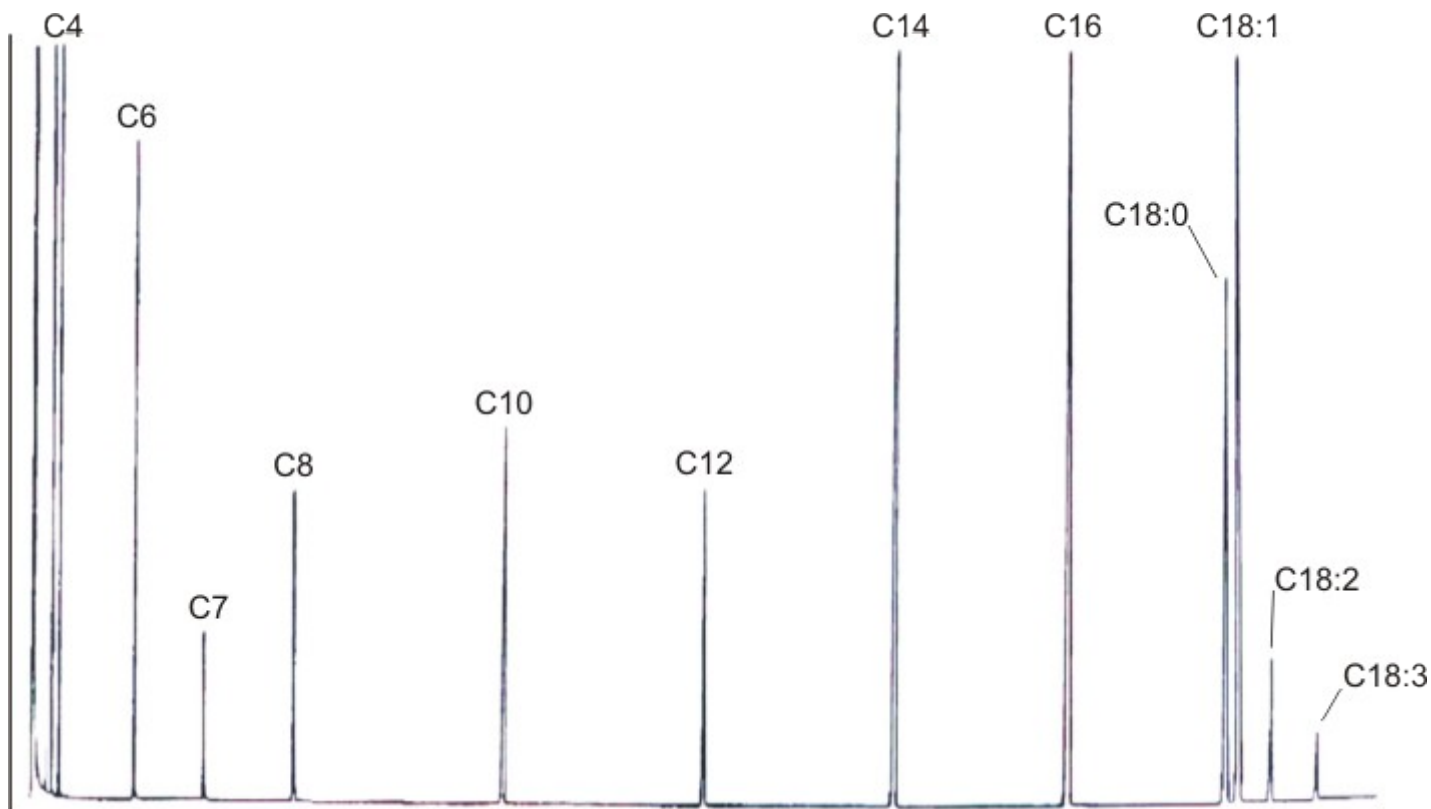

Colonna

Fase stazionaria	MEGA-WAX
Diametro interno	0.32 mm
Spessore film	0.25 µm
Lunghezza	25 m

Condizioni

Iniettore	Split	250°C
Rapporto split	1:50	
Volume iniezione	1 µL	
Oven	T iniziale	50°C
	Rampa	4°C/min
	T finale	210°C
Rivelatore	FID	250°C
Gas di trasporto	Idrogeno	60 kPa

Identificazione

1	Acido butirrico ME
2	Acido caproico ME
3	Acido eptanoico ME
4	Acido caprilico ME
5	Acido decanoico ME
6	Acido laurico ME
7	Acido miristico ME
8	Acido palmitico ME
9	Acido stearico ME
10	Acido oleico ME
11	Acido linoleico ME
12	Acido linolenico ME