

**Condizioni:**




Iniezione: Split 250°C, 0.5µL, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL in n-Esano.


**Contattaci** per avere maggiori informazioni.

**Lavandulolo**

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

-  Fase Chirale: **MEGA-DEX DET Beta**  
Codice Catalogo: DEX-DET-B-025-025-25
-  Fase Chirale: **MEGA-DEX DMT Beta**  
Codice Catalogo: DEX-DMT-B-025-025-25
-  Fase Chirale: **MEGA-DEX DMP Beta**  
Codice Catalogo: DEX-DMP-B-025-025-25

Dimensioni delle colonne: **0.25mm, 0.25µm, 25m.**

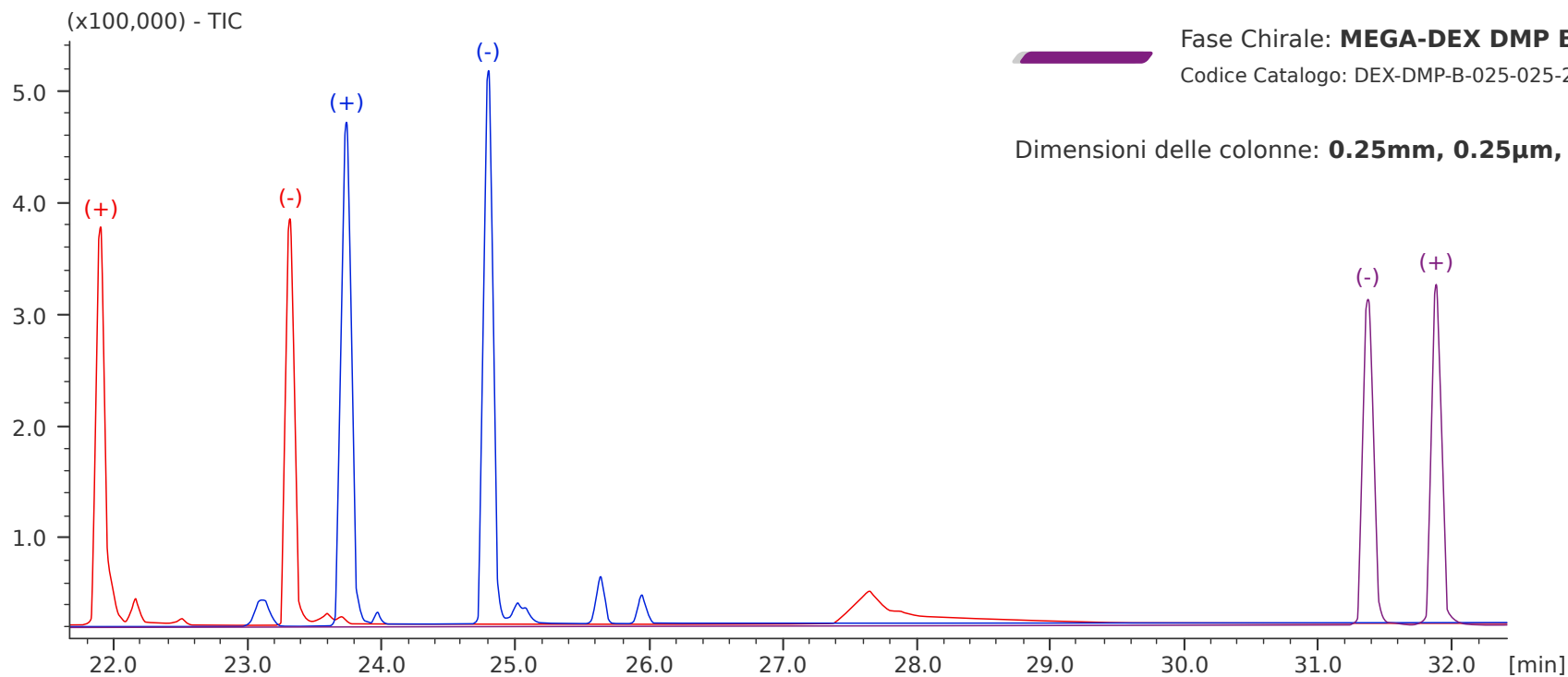

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Cordero et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

