

(Iso)Mentolo, Neomentolo e Neoisomentolo

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Condizioni:


Iniezione: Split 250°C, 0.5µL, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL in n-Esano.

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Colonna: **MEGA-DEX DAC Beta - 0.25mm, 0.25µm, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DAC-B-025-025-25

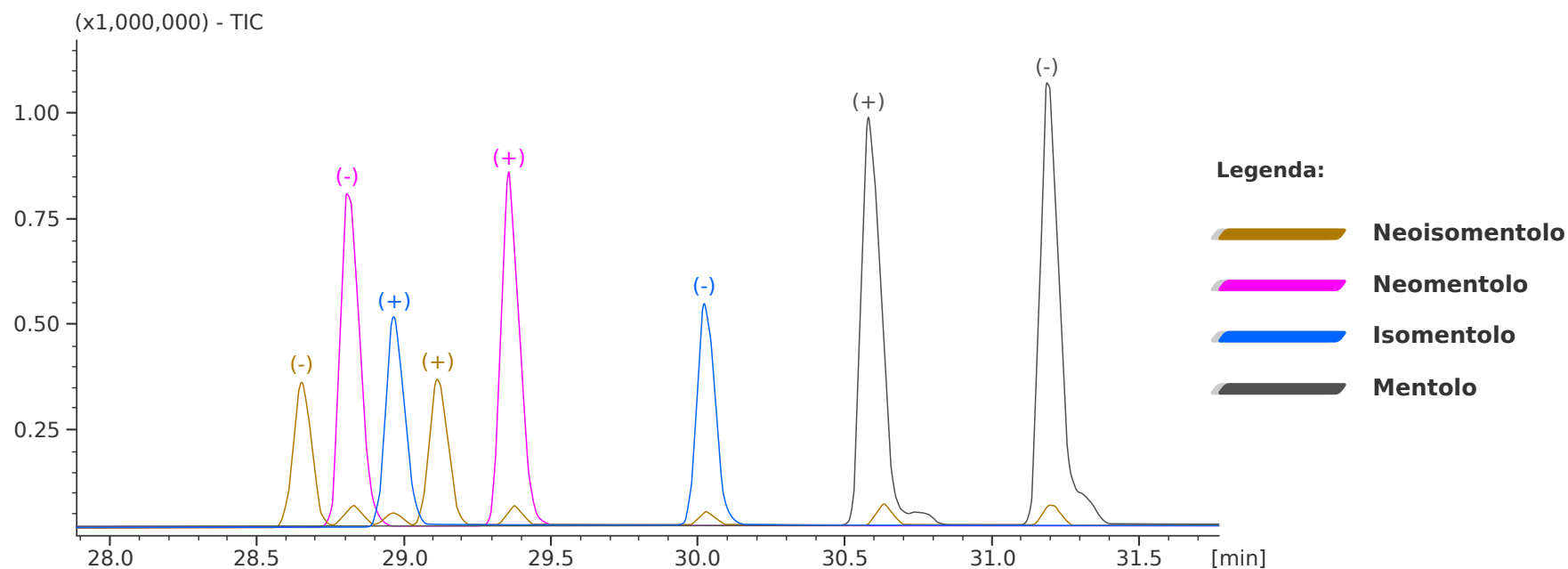

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Cordero et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

