

Camomilla - Olio Essenziale

Colonna: **MEGA-WAX FAST - 0.10mm, 0.10µm, 5m**

Codice Catalogo: F-WAX-010-010-5

Condizioni:

Iniezione: Split 230°C, 0.5µL, 1:250 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1% in Cicloesano.


Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 50°C (0.1min), 30°C/min, 250°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 0.5 mL/min.

Identificazione:

1. Trans-Beta-Farnesene
2. Bisabololo Ossido B
3. Alfa-Bisabolone Ossido
4. Alfa-Bisabololo
5. Camazulene
6. Bisabololo Ossido A
7. Spiro-etero

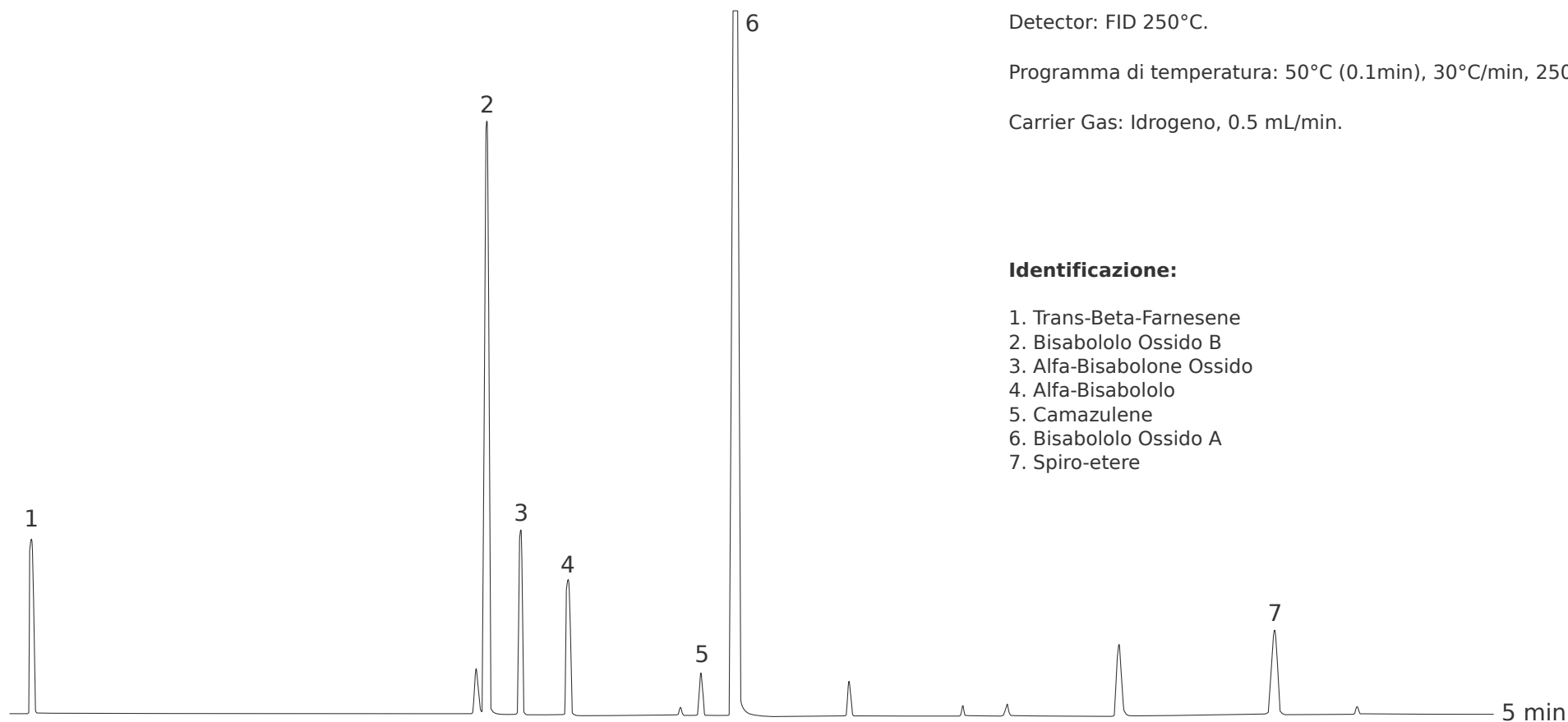

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Brunelli et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

