

Gamma-Lattoni

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Colonna: **MEGA-DEX DET Beta - 0.25mm, 0.25µm, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DET-B-025-025-25

Condizioni:


Iniezione: Split 250°C, 0.5µL, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL per ogni componente in n-Esano.

Contattaci per avere maggiori informazioni.

Identificazione:

1. (+/-) Gamma-Esalattone
2. (+/-) Gamma-Eptalattone
3. (+/-) Gamma-Ottalattone
4. (+/-) Gamma-Decalattone
5. (+/-) Gamma-Undecalattone
6. (+/-) Gamma-Dodecalattone

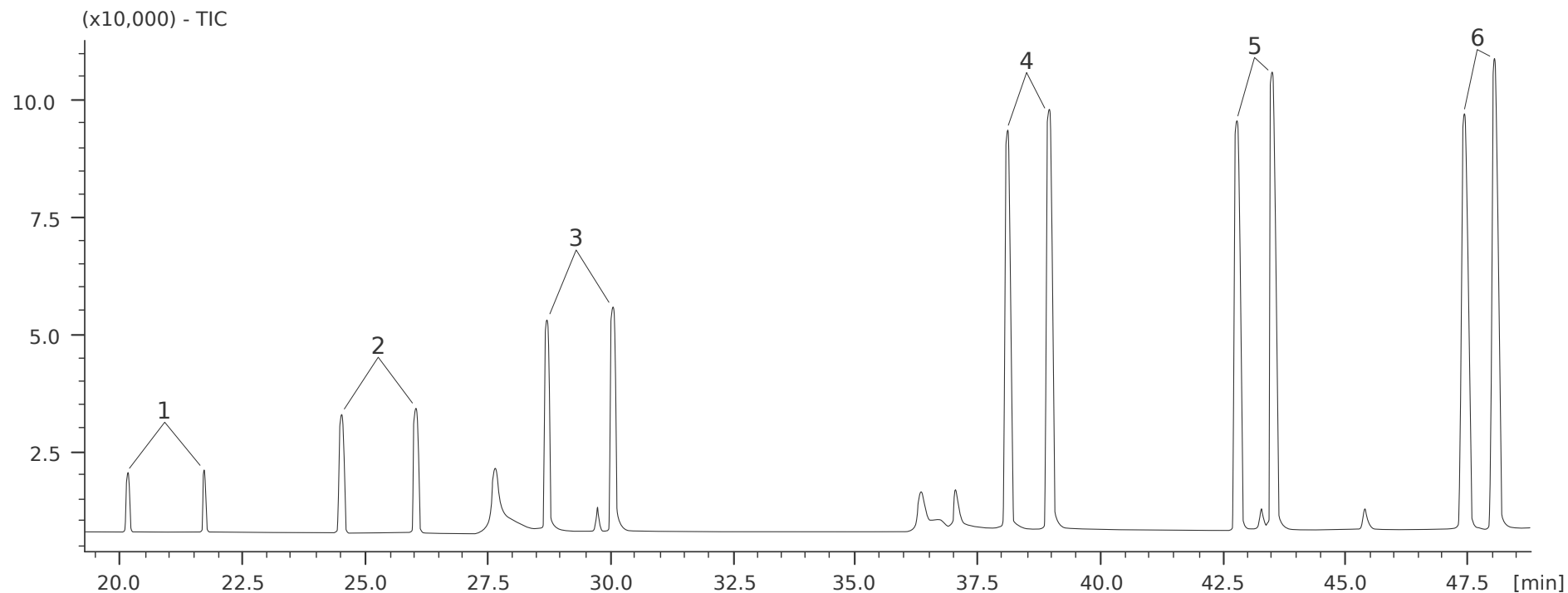

Cortese concessione di: Prof. C.Bicchi, C.Cordero et al. - Università di Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Via Pietro Giuria, 9 - Torino - Italy.

