

## Solventi residui negli imballaggi alimentari

Colonna: **MEGA-1701 - 0.15mm, 1.00µm, 10m**

Codice Catalogo: S-1701-015-100-10


### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 0.2µL con micro-siringa,  
200mL/min flusso di Split.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 35°C (0.5 min),  
13°C/min, 110°C.

Carrier Gas: Elio, 140 kPa.

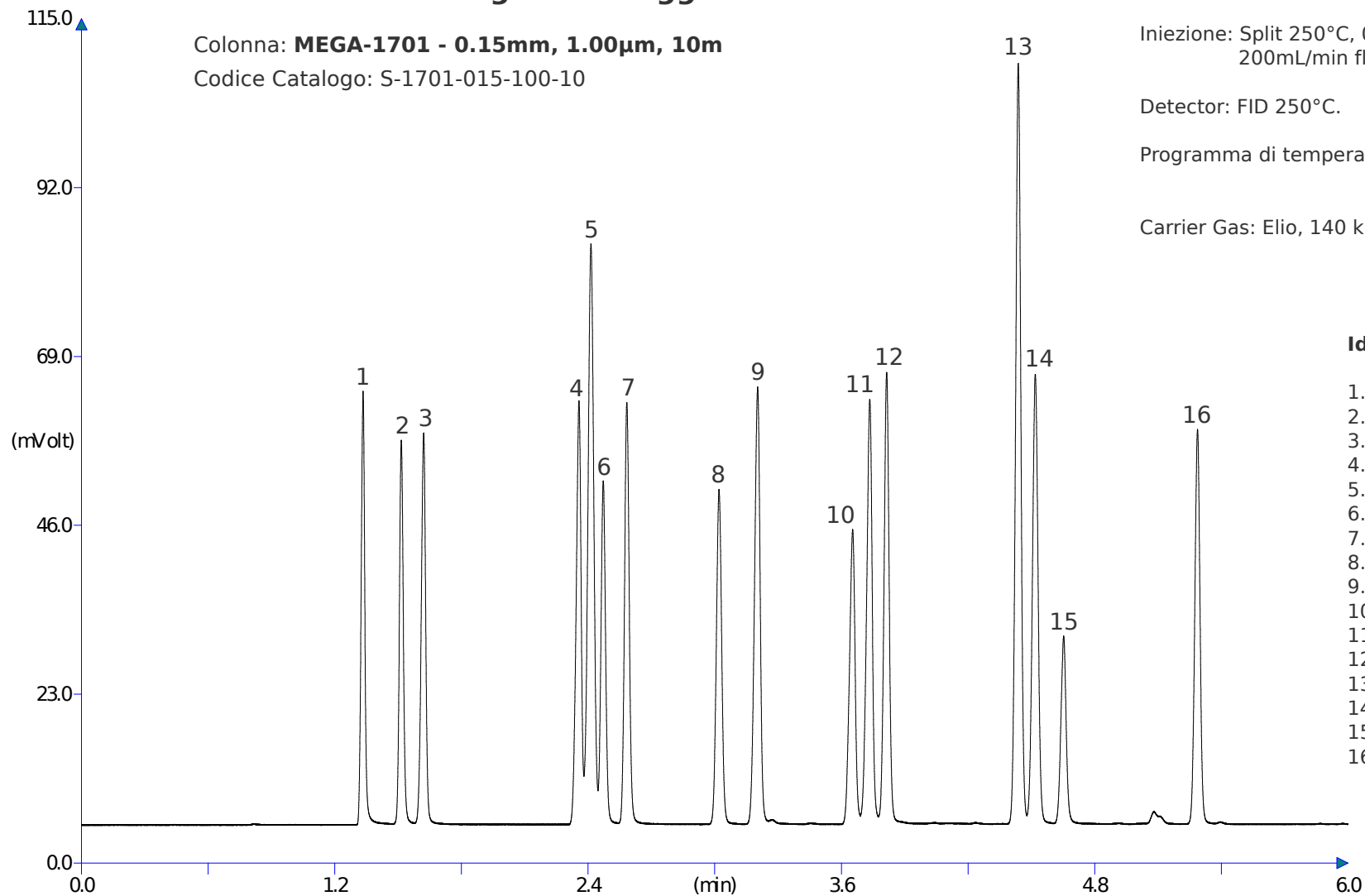

### Identificazione:

1. Etanolo
2. Acetone
3. 2-propanolo
4. 1-propanolo
5. Cicloesano
6. Etil acetato
7. Metil etil chetone
8. Isopropil acetato
9. Isobutanolo
10. Metossi propanolo
11. 1-butanolo
12. Propil acetato
13. Toluene
14. Isobutil metil chetone
15. Etossi propanolo
16. Butil acetato

